




为您的珍贵样本提供安全，
可重复性保障

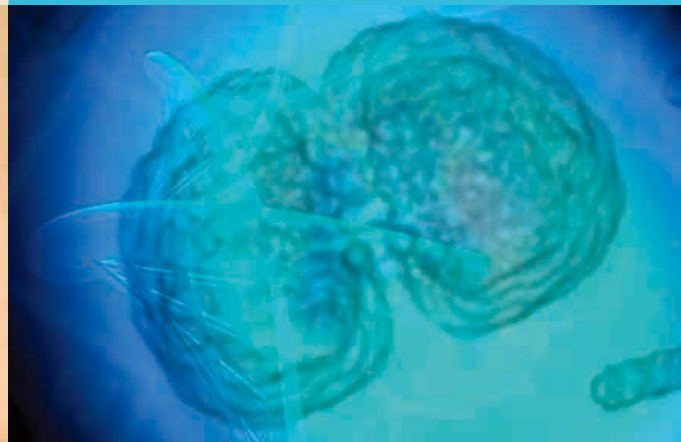

Thermo Scientific Nunc 体外辅助生殖产品

Thermo
SCIENTIFIC

IVF产品的标准是：安全可靠并且对胚胎的发育没有任何毒副作用。Thermo Scientific Nunc IVF产品是严格按照ISO13485标准生产，保证给客户提供始终如一的高质量的产品。

我们替您做安全测试，
免除您的担忧，
减轻您的劳动负荷



证书及质量保证

鼠胚测试(MEA)

单细胞鼠胚胎毒性试验。培养96小时后，至少80%的单细胞进入扩张囊胚期。MEA测试是准入试验，只有通过该测试的产品才能被销售。

人精子活力测试(HSSA)

样品采集24小时后，人类精子的活性 $\geq 70\%$ 才能通过HSSA试验。对照样本活动力至少要达到初始运动的50%才能通过试验。HSSA试验是准入试验，只有通过该测试的产品才能被销售。

合格证书

每个批次的试验结果可以网上查询，查询地址：
www.thermoscientific.com/nunccertificates

获得用户名和密码请联系邮箱：
certificate.nunc@thermofisher.com

生物相容性

所有的原料均通过USP生物反应类vi-500试验（7天植入）和细胞毒性ISO10993标准。

无菌性

辐照灭菌，符合ISO11137标准（卫生保健产品灭菌要求与辐射灭菌程序控制规范）。

无热源

各批次产品测试都按照FDA指南中LAL – 测试原则用鲎细胞溶解物进行检测。

使用Cape Cod LAL检测试剂盒根据经USP认证的测试方法“使用细胞溶解物检测和量化细菌内毒素”进行内毒素检测。达到USP标准（内毒素水平小于20内毒素单位/样品或者0.5内毒素单位/mL），经认证无热源。



采集和准备

在采集和准备过程中，敏感的体外受精实验需要极其细致的护理。无论是对精子还是卵细胞，样品处理对发育能力都有着至关重要的影响。我们不断强调质量，改进设计，为您提供方便可靠的产品用来收集和处理雄性和雌性配子。

Nunc IVF培养皿

- 有利于气体交换的通风盖
- 选择合适的尺寸：
35mm, 60mm, 90mm
- 每个批次的合格证书
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP类VI级测试
 - MEA准入测试

Nunc IVF 11mL离心管

- 每包5个的小包装
- 清晰的体积刻度
- 和标准离心机兼容
- 每个批次的合格证书
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP类VI测试
 - 准入测试 (MEA和HSSA)

Nunc 14mL圆底试管

- 可透气包装轻松应对挥发性有机化合物
- 双排气孔/密闭盖的设计优化气体交换
- 每个批次的合格证书
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP类VI测试
- 只用于研究



胚胎受精、成熟与转移

Nunc ICSI皿和中心孔培养皿是专门为体外受精设计的,通过CE IIA类医疗器械认证用于IVF。平底设计利于热交换,保证操作与培养过程中的温度恒定。优化的操作性能使培养皿方便抓取,移动,更安全方便的对您的珍贵的受精卵和胚胎进行操作。

Nunc IVF ICSI培养皿

- 平底设计有助于保持最佳温度
- 低侧面设计为ICSI操作过程提供最佳操作角度
- 超级打磨光学中心可以清晰地看到样本
- 易抓取设计提高安全性
- 每个批次都有合格证书:
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP VI类测试
 - MEA准入测试

Nunc IVF中心孔培养皿

- 孔壁设计提供了完美的角度轻松进行样本接入和清洗
- 平底设计利于维持最佳温度
- 易抓取设计提高安全性
- 每个批次的合格证书:
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP VI类测试
 - MEA准入测试

Nunc IVF 4孔培养板

- 有凹口的盖子和皿的设计方便合理定位,预防交叉污染
- 底部边缘0.8mm的支架防止孔底的刮擦,同时利于保持最佳的温度
- 每个批次的合格证书:
 - 无菌(SAL 10^{-6})
 - 无热源
 - USP VI类测试
 - MEA准入测试



产品规格和订购须知

CE标注，FDA和MEA认证

Nunc IVF培养皿

无菌

描述	ICSI培养皿	中心孔培养皿
货号	150265	150260
表面	未处理	未处理
排气孔	有	有
盖子	有	有
外部尺寸，mm	9 x 51	16 x 55
每包/箱	1/120	1/120

Nunc IVF 4孔培养皿

无菌

描述	4孔培养皿	4孔培养皿
货号	144444	179830
表面	nunclon三角表面	未处理
培养面积cm²/孔	1.9	1.9
外部尺寸，mm	66 x 66	66 x 66
每包/箱	4/120	4/120

Nunc IVF培养皿

无菌

描述	35 x 10培养皿	60 x 15培养皿	90 x 17培养皿
货号	150255	150270	150360
表面	未处理	未处理	未处理
排气孔	有	有	有
培养面积cm²/孔	8.8	21.5	56.7
外部尺寸，mm	35 x 11	54 x 14	88 x 15
每包/箱	10/500	10/400	10/150

CE标注和MEA测试

Nunc IVF离心管*

无菌

描述	11mL离心管
货号	137860
盖子类型	插塞
材质	聚苯乙烯/聚丙烯
最大离心转速	3000
底部形状	圆锥
外部尺寸，mm	16 x 110
每包/箱	5/300
每包/盒/箱	-

MEA测试

Nunc 14mL圆底离心管

描述	14mL圆底试管
货号	150268
材质	聚苯乙烯/聚丙烯
盖子类型	双重功能盖
排气孔	通气/关闭
建议使用容量，mL	14
每包/箱	10/500



Thermo Scientific为您提供其他相关产品如下



Thermo Scientific
生物安全柜



Thermo Scientific
CO₂培养箱



Thermo Scientific
超低温冰箱



Thermo Scientific
洗板机



Thermo Scientific
离心机和转子



赛默飞官方微信



赛默飞实验室产品和服务

赛默飞世尔科技(中国)有限公司

上海(中国总部)
上海浦东新金桥路27号7号楼

北京
北京市安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层

广州
广州市东风中路410-412号
时代地产中心3001-05室

成都
成都市武侯区临江西路1号
锦江国际大厦1406室

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室

香港
香港新界沙田, 沙田乡事会路138号
新城市中央广场第一座九楼911-915室

武汉
武汉东湖高新技术开发区
高新大道858号A7楼

全国服务热线: 800 810 5118 400 650 5118 (支持手机用户)

官方网站: www.thermofisher.cn

BR32032CN1607YJ_NUNCIVF

ThermoFisher
SCIENTIFIC

The world leader in serving science